

# arnica™

## BASKÜL

### BANYO BASKÜLÜ



## Kullanma Kılavuzu

# BANYO BASKÜLÜ KULLANMA KILAVUZU

## Perfect 9003-Perfect 9377-Perfect 9420

Baskülünüzü kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığımızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Baskülünüzü bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece baskülünüzden en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

## İÇİNDEKİLER

- A. Emniyet Kuralları
- B. Cihazın Tanıtımı
- C. Teknik Özellikler
- D. Kullanım
- E. Temizlik ve Bakım

## A. EMNİYET KURALLARI

- Tartınızı düz bir zemine koyunuz, üzerine çıkmadan önce tartının ayaklarının zemine iyice bastığına emin olunuz aksi takdirde düşebilirsiniz. Tartının üzerinde iken sabit durunuz.

**DİKKAT:** Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.

## B. TEKNİK ÖZELLİKLER

Model: Perfect 9003

Hassas tartma

Kolay okunabilir ekran

Şık dizayn

Mak.150 kg. tartma

1 x lityum pil (CR2032)

Model: Perfect 9377

Hassas tartma

Kolay okunabilir ekran

Şık dizayn

Mak.150 kg. tartma

2 x AAA pil

Model: Perfect 9420

Hassas tartma

Kolay okunabilir ekran

Şık dizayn

Mak.150 kg. tartma

2 x AAA pil

## C. KULLANIM



- Tartınızı sert ve düz bir zemin üzerine koyunuz.
- Tartıyı açmak için ayağınızın ucu ile platform üzerinde gösterilen yere dokununuz. Birkaç saniye bekleyiniz.

**Dikkat:** Eğer baskülünüzün ekranında 'Err' ifadesi çıkarsa; baskülünüzü koyduğunuz yerde bir problem var demektir. Baskülünüzün dört ayağının da yere temas deęip deęmedięini kontrol ediniz. Gerekirse yerini deęiřtiriniz.

Err

- Yavaşça baskülünüzün üzerine çıkınız ve kilonuzu hesaplayana kadar hareketsiz durunuz. Tartınız harekete karřı hassastır, hareket ederseniz gösterge deęiřebilir.



63.1

- Baskülünüz kilonuzu tam ve doęru olarak ölçtüęünde ekranda kilonuzu sabitleyecektir.
- Baskülünüzden indięinizde baskülünüz otomatik olarak kendini kapatacaktır.

Err

- Eğer tartıldıktan sonra ekranda aęırlıęınız yerine 'Err' yazısı çıkarsa 150kg. üzerinde bir aęırlık söz konusu demektir.


Lo

- Eğer ekranda 'Lo' ifadesi varsa, bu pilinizi deęiřtirmeniz gerektięinin göstergesidir.
- Her zaman aynı baskülü kullanmanızı tavsiye ederiz. Farklı basküller kullanırsanız, kilonuzun deęiřtięini zannedebilirsiniz.
- Kilonuzu kontrol amacıyla her zaman aynı kořullar altında tartınız. Sabah ilk iř olarak tartılmanız tavsiye edilir.

### **Pil deęiřtirme;**

- Pil yuvasının kapaęını açınız ve dikkatli bir řekilde pili yerinden çıkarınız. Pili çıkartırken elektrotu ASLA arkaya doęru eęmeyiniz, aksi halde kırılabilir. Eski pili ev çöplerinizi attıęınız yere atmayınız.

- Eski pili çıkarmak için; pil tutucuyu nazikçe çekiniz ve pili çıkarınız (Resim A). Yeni pili takmak için; pilin bir tarafını elektrotun altına doğru itiniz ve daha sonra diğer tarafından bastırınız (Resim B-C).

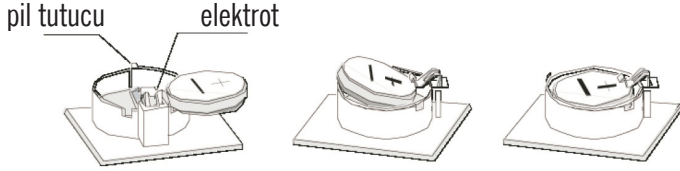

Resim A

Resim B

Resim C

**Dikkat:** Elektrotu sertçe çekmeniz kırılmasına neden olabilir. Bu nedenle pil değiştirirken asla elektrotla dokunmayınız.

#### D. TEMİZLİK ve BAKIM

- Kuru ve yumuşak bir bez veya hafif nemli deterjanlı bir bez kullanarak cihazı temizleyebilirsiniz. Alkol, benzin gibi kuvvetli kimyasal solüsyonları kullanmayınız.
- Baskülün yüzeyi nemli veya ıslak olduğunda kaygan olabilir. Kendi güvenliğiniz için mutlaka yüzeyi kuru olduğundan emin olunuz.
- Baskülünüzü her zaman sert ve düz zeminlerde kullanınız. Halı, kilim vs. gibi zeminlerde kullanmayınız. Eğer uzun bir süre baskülü kullanmayacaksınız pillerini çıkartınız.
- Baskülü yere düşürmeyiniz. Üstüne zıplamayınız. Baskülünüz hassas bir ölçme cihazı olduğu için kuvvetli darbelerden ve sarsıntılardan sakınınız.
- Baskülünüzü serin ve kuru bir yerde saklayınız.
- Baskülünüzü daima yata pozisyonunda saklayınız.
- Baskülünüz sadece insan ağırlığı ölçmek üzere dizayn edilmiştir. Başka amaçlarla kullanmayınız.
- Baskülünüzdeki açık yerlere herhangi bir obje sokmaya çalışmayınız.
- Cihazı kendiniz açıp tamir etmeye çalışmayınız. Teknik yardım için en yakın Arnica Yetkili Servisine başvurunuz.
- Eğer cihaz açılmıyorsa, pilin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer pil takılıysa ve cihazınız hala çalışmıyor ise pil bitmiş olabilir. Yeni bir pil takınız. Tekrardan cihaz açılmazsa en yakın Arnica Yetkili Servisine götürünüz.

#### TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik

parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

### **DIKKAT:**

- Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.
- Çeyizlik, hediyeleşim v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Arnica Yetkili Servisi tarafından yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.
- Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürünü satan kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).
- Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a. Sözleşmeden dönme,
  - b. Satış bedelinden indirim isteme,
  - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.**

**İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA:**

**SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.**

Cihangir Mah. Dolun Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL

Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat

Faks : (0212) 422 09 29

Menşei: P.R.C.

Bu cihaz Avrupa Birliği  ve  Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

## 9011 KULLANMA KILAVUZU

Tartınızı kullandıkça ne kadar doğru seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Tartınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece tartınızdaki en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

### İÇİNDEKİLER

1. Emniyet kuralları
2. Cihazın tanıtımı
3. Teknik özellikler
4. Kullanım
5. Temizlik ve Bakım

### EMNİYET KURALLARI

Tartınızı düz bir zemine koyunuz, üzerine çıkmadan önce tartının ayaklarının zemine iyice bastığına emin olunuz aksi takdirde düşebilirsiniz. Tartının üzerinde iken sabit durunuz.

### CİHAZIN TANITIMI

- A. Tartı göstergesi
- B. Ayar / Sıfırlama düğmesi
- C. Tartı ayakları



### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Hassas tartma
- Kilonuzu kolayca kontrol etme imkanı
- Kolayca okuma
- Şık dizayn
- Maksimum 120 kg. tartma kapasitesi

### KULLANIM

Tartınızı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve müteakip kullanımlar için muhafaza ediniz.

- Tartınızı sert ve düz bir zemine yerleştiriniz.
- Tartınıza çıkmadan önce ayar düğmesinden sıfırlayınız.

- Tartınızın üzerine çıkınız ve hareketsiz durunuz. Tartınız harekete karşı hassastır, hareket ederseniz gösterge değışebilir.
- Her zaman aynı tartıyı kullanmanızı tavsiye ederiz. Farklı tartılar kullanırsanız, kilonuzun değıştiđini zannedebilirsiniz.
- Kilonuzu kontrol amacıyla her zaman aynı kořullar altında tartılınız. Sabah ilk iř olarak tartılmanız tavsiye edilir.

## **TEMİZLİK VE BAKIM**

- Tartınızı temiz ve nemli bir bez ile silerek temizleyiniz.
- Tartınız iyi çalışmadığında kendiniz tamir etmeye çalışmayın, en yakın ARNICA yetkili servisine götürün.
- Tartınız ev aleti olarak tasarlanmıştır, ticari amaçlar için kullanmayınız.

## **TAřIMA VE NAKLİYE**

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuřak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlıř ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

## **DİKKAT:**

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürölme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyeelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Arnica Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürünüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kařesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize řahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
  - a. Sözleşmeden dönme,**
  - b. Satış bedelinden indirim isteme,**



c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.**

**İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA:**

**SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.**

Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL

Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat

Faks : (0212) 422 09 29

Menşei: P.R.C.

Bu cihaz Avrupa Birliği  ve  Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

## GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz cihaz Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

### GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan hatalar hariç) olmak üzere, tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinde birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

### İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolun Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No: 7, 34310, Avcılar /İSTANBUL

Telefon : (0212) 422 19 10

Faks : (0212) 422 09 29

### FİRMA YETKİLİSİNİN

İmza - Kaşesi :

ELEKTRİK MOTORLARI  
**Senur**  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### MALIN

Cinsi : Banyo Baskülü

Markası : Arnica

Modeli : Perfect 9377-9420-9003

Bandrol ve Seri No :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Garanti Süresi : 3 Yıl

Azami Tamir Süresi : 20 İş günü

### SATICI FİRMANIN

Ünvanı :

Adres :

Telefon :

Faks :

Fatura Tarihi ve No. :

Tarih/İmza/Kaşe :